

Infinity Air Walker

Harte Schale, leichter Kern




Quality for life

Infinity Air Walker

Der Infinity Air Walker zur konservativen oder postoperativen Versorgung unterschiedlicher Verletzungen im Fuß-/Sprunggelenkbereich wird seinem Beinamen „Air“ gleich in mehrfacher Hinsicht gerecht:



Der Walker zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit aus. Die lamellenartige Rahmenkonstruktion macht den Walker besonders atmungsaktiv, sorgt für ein angenehmes Klima und erhöht somit den Tragekomfort. Das integrierte Luftpolster, ermöglicht die einfache und exakte Dosierung der Kompression ohne zusätzliches Werkzeug. Der Infinity Air Walker ist sowohl mit hohem als auch mit niedrigem Schaft erhältlich.

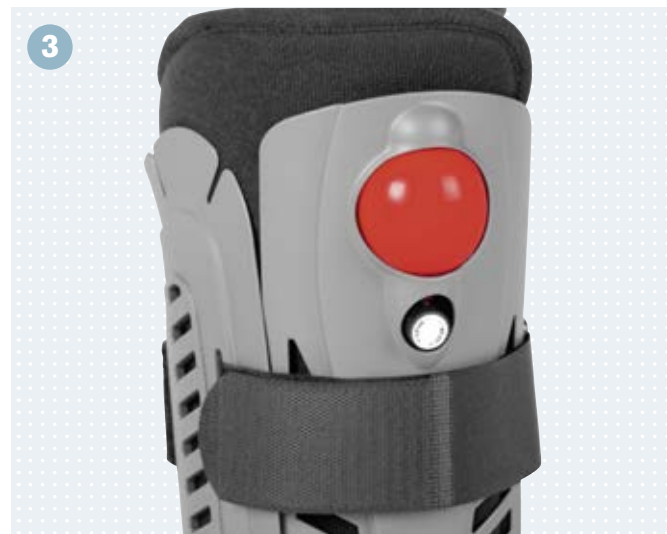

Die Vorteile auf einen Blick:

- Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
- Luftdurchlässiger Rahmen für angenehmes Klima (1)
- Individuell verstellbarer Zehenschutz (2)
- Antischock- und Antirutschsohle
- Integrierte Pumpe zur exakten Dosierung der stabilisierenden Kompression (3)
- Schaftrand im Fächer-Design zur Vermeidung von Druckstellen (4)
- Universell einsetzbar (rechts/links)
- Regen- und Nachtüberzüge sind auf Anfrage erhältlich.



Indikationen	Infinity Air Walker, high 50S19	Infinity Air Walker, low 50S23	Infinity Achilles Walker 50S191
Distale Fibulafraktur	•	•	
Stabile Vorfuß-, Mittelfuß- und/oder Knöchelfraktur	•	•	
Knöcheldistorsionen	•	•	
Weichteilverletzungen des Fußes	•	•	
Achillessehnenrupturen			•
Exostosenabtragung bei Hallux Valgus		•	

Infinity	Artikelnummer	Max. Körpergewicht	Schuhgröße	HMV.-Nr.
Air Walker, high	50S19=S	200 kg	36-38	23.06.01.0XXX
	50S19=M		39-42	
	50S19=L		43-46	
	50S19=XL		47+	
Air Walker, low	50S23=S	200 kg	36-38	23.06.01.0XXX
	50S23=M		39-42	
	50S23=L		43-46	
	50S23=XL		47+	
Achilles Walker	50S191=S	200 kg	36-38	23.06.01.1XXX
	50S191=M		39-42	
	50S191=L		43-46	
	50S191=XL		47+	

